


# Extracteur de lame de bistouri Swann Morton - Boîte

Référence 05461

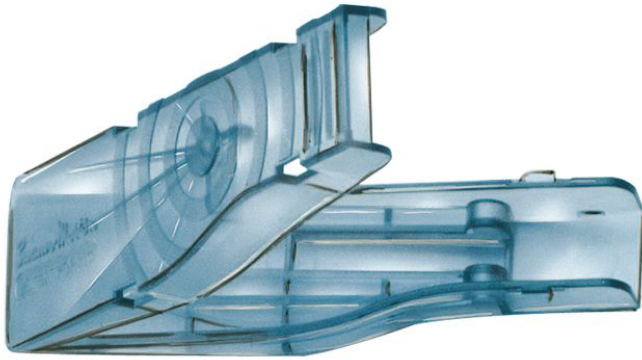

Prix du produit :

**19,70 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Description du produit :

**L'extracteur de lame Swann Morton, est un [instrument médical](#) pratique pour ôter en toute sécurité les lames de chirurgie.**

Disponible en modèle stérile ou non stérile, l'**extracteur de lame** est conçu pour enlever sans danger les lames chirurgicales standards montées sur les manches de bistouri N°3 et N°4 Swann Morton. Il protège le personnel hospitalier en évitant les coupures et les éraflures dues au démontage des lames.

Conçu en résine "K" Phillips, de qualité K RO1 "Butadiène Styène", il est sans latex et sans produit d'origine animale.

**Modèle d'extracteur stérile** : boîte de 50 unités emballées.

Conditionnement unitaire en sachet "p". Le feuillet supérieur est en papier kraft blanchi sur une trame de vernis-laque. Le feuillet inférieur est en polyester / polyéthylène (nylon poly).

Mode de stérilisation par irradiation au Cobalt 60 à un minimum de 25kGy par Swann-Morton (Services) Ltd, Owlerton Green, Sheffield S6 2BJ, Grande Bretagne.

Date de péremption : 5 ans à partir de la date de stérilisation - elle est indiquée sur l'emballage individuel et sur la boîte.

Marquage modèle stérile : **CE 0086**

La boîte est imprimée en jaune et noir avec un vernis de protection anti-UV.

**Modèle d'extracteur non stérile** : boîte de 100 extracteurs en vrac.

Marquage modèle non stérile : **CE**.

La boîte est imprimée en bleu.

L'extracteur de lame est un produit de fabrication européenne, fabriqué par l'usine Swann-Morton Ltd à Sheffield (GB).

Tous les marquages sont normalisés sur les boîtes : Code-barre EAN - Numéro de lot et date de péremption

L'élimination des extracteurs usagés se fait par incinération, sans produire de sous-produits chlorés dangereux.