


Conteneur en carton pour DASRI

Référence 05608

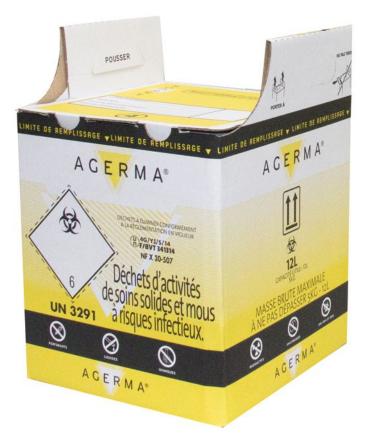

Prix du produit :

32,29 € taxe inclu

Description brève du produit :

Collecteur en carton pour les déchets à risques infectieux. 2 volumes disponibles : 12 et 50 litres.

Vendu par lot de 10.

Description du produit :

Collecteur de déchets dangereux DASRI.

Les **conteneurs en carton Agerma® sont des emballages à DASRI** conformes à l'Arrêté DGC du 24/11/2003 et à la Norme NFX 30-507.

Le conteneur est composé d'un carton avec à l'intérieur un sac en polyéthylène jaune.

Le conteneur carton AGERMA est le conditionnement idéal, pratique et sûr pour vos déchets DASRI mous. Il a été étudié pour que 100% du volume utile soit occupé, grâce à la mise en place de la sache à l'intérieur du conteneur permettant un foisonnement optimal et à la limite de remplissage visible à l'extérieur comme à l'intérieur. Ceci permet d'optimiser le prix du conteneur. Un QR code permet de visualiser une vidéo de montage du conteneur carton AGERMA.

Le conteneur carton AGERMA possède un débord de sache important et 4 grands rabats pour faciliter leur mise en place sous les paillasses. Afin de faciliter le suivi, il est muni d'un code barre



unique sur chaque contenant. Il est également équipé de poignées ergonomiques et résistantes formées de 3 épaisseurs de carton, d'un dispositif de préhension solidaire de l'emballage,d'un lien de fermeture intégré au sac, ainsi que d'une fermeture provisoire et définitive grâce à un système de double pattes de verrouillage pour la fermeture définitive.

Caractéristiques du collecteurs de déchets :

- Collage périphérique de la sache, coloré, permettant la visualisation de la limite de remplissage à l'intérieur de la caisse
- Couleur prédominante du carton jaune
- Fermeture provisoire et définitive à grand rabats
- Double pattes de verrouillage pour la fermeture définitive
- Lien de fermeture solidaire de l'emballage
- Poignées extérieures, ergonomiques et resistantes formées de 3 épaisseurs carton
- Schéma de montage (fermeture provisoire et définitive)
- Mention « Déchets d'activités de soins à risques infectieux » en toutes lettres
- Étiquette danger biologique
- Pictogramme interdiction de collecter des déchets perforants
- Cadre du nom producteur / date de mise en service / date de fermeture
- 1 code barre unique sur chaque contenant
- 1 QR Code permettant de visualiser la vidéo de montage du conteneur

Disponible en deux modèles :

- 12 litres : dimensions 230 x 230 x 240 mm Carton + sac polyéthylène
- 50 litres: dimensions 280 x 280 x 640 mm (format haut) Carton + sac polyéthylène

Vendu par lot de 10 conteneurs DASRI!