

Mini collecteur aiguilles et déchets Stil'Eco essentia 0,6 L

Référence 06460



Prix du produit :

2,03 € taxe inclu

Description brève du produit :

ctrice d'aiguilles et déchets de soins usagés en polypropylène composée d'une cuve, d'un couvercle avec trappe à ouverture/fermeture mono manuelle provisoire et définitive avec système inviolable. Autoclavable à 134 °C pendant 18 minutes. Collecteur conforme aux normes françaises pour les déchets d'activités de soins à risques infectieux **DASRI**.

Description du produit :

Vous pouvez retrouver d'autres produits similaires [ici](#).

Mini collecteur de déchets médicaux (DASRI) idéal pour les cabinets médicaux, infirmiers libéraux, podologues et particuliers.

Boîte en polypropylène (PP) composée d'une cuve, d'un couvercle avec trappe à ouverture/fermeture mono manuelle provisoire et définitive avec système inviolable

Le couvercle est équipé d'une gouttière de sécurité ; il possède une large ouverture (50x35mm) et des opercules de désolidarisation d'aiguilles, notamment un opercule spécialement conçu pour les embouts de stylos à insuline/adrénaline. Collecteur très résistant et de petite taille avec fermeture provisoire et définitive illustrées ci-dessous.

Facilement transportable pour les rendez-vous à domicile et peut être ranger dans une sacoche ou un sac médical.

Il résiste au passage en autoclave à 134 degrés celsius pendant 18 minutes.

Ce collecteur est de fabrication française.

Recommandations d'utilisation :

- Ne pas forcer lors de l'introduction d'aiguilles ou de déchets
- Si vous avez la possibilité fixer le collecteur sur un support plane
- Ne pas dépasser la capacité de remplissage du collecteur
- Assurez-vous que le collecteur est à votre portée de mains le couvercle ouvert avant son utilisation
- Disposez immédiatement des déchets dans le collecteur une fois le traitement ou le soin terminé

Caractéristiques :

Dimensions : (L) 117 x (l) 73 x (h) 125 mm

Poids : 91 gr

Matière : PP


Volume total : 0,63L

Volume de remplissage : 0.51L

Couleurs : Jaune et blanc

Résistances : Perforation et chute

Normes : NF EN ISO 23907, NF X30-511, NF302 et ADR UN3291

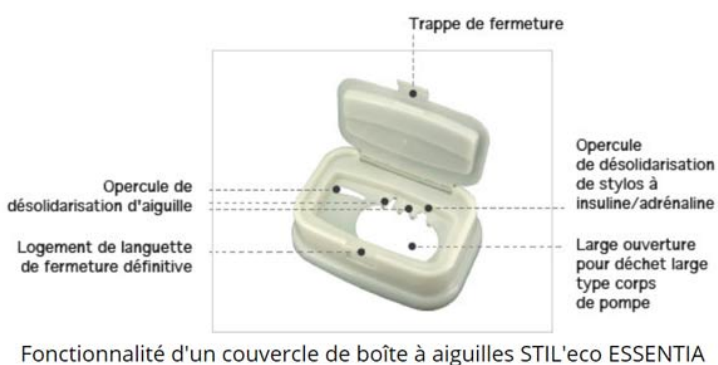



FERMETURE PROVISOIRE
Entre chaque usage

Fermer la trappe,
languette de manipulation
vers le haut

Respecter la limite
de remplissage



FERMETURE DEFINITIVE




1. Plier la languette
vers le bas




2. Refermer la trappe en vérifiant
que la languette rentre
dans son logement

3. Puis **presser fortement** sur la trappe côté
languette, le « clic » assure
la fermeture définitive

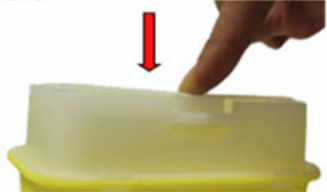

FONCTIONNALITES DU COUVERCLE

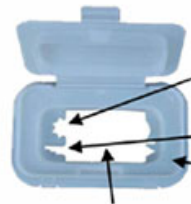

- Opércule pour gros embouts vissés
type stylos à insuline
- Opércule pour embouts seringues vissés
- Opércule pour embouts seringues éjectables

Grande ouverture pour déchets larges



Boîte colle

Autres versions de boîte à déchets médicaux disponibles !

[Ref. 06460 - Collecteur d'aiguilles pocket Essentia 0,25 L](#)

[Ref. 06459 - Collecteur d'aiguilles format pocket 0,8 L](#)