

Stéthoscope Magister II Spengler - Double pavillon

Référence 07042



Prix du produit :

67,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Polyvalence et excellence pour un instrument 100% Spengler

Stéthoscope double pavillon en acier inoxydable avec une haute qualité acoustique. Grâce à ce nouveau stéthoscope dédié à l'auscultation, vous pourrez pratiquer tous les types d'examens et faire des diagnostics précis et fiables. Le Spengler Magister II est disponible en 2 coloris (black et silver).

IMPORTANT: Notre option de gravure sur les stéthoscopes sera temporairement suspendue durant tout le mois d'août ; en conséquence, toutes les commandes comprenant cette personnalisation seront expédiées à partir du 25 d'août.

Description du produit:

Nouveau stéthoscope Spengler MAGISTER II double pavillon.

Magister II, c'est le stéthoscope polyvalent et performant signé Spengler. Doté d'une acoustique excellente, il conviendra parfaitement aux médecins, pédiatres ou aux étudiants en médecine. Fabriqué en acier inoxydable, il possède un pavillon lourd por plus de résonnance. Il est le fruit d'une recherche avec les ingénieurs de l'Ecole Centrale et du Laboratoire d'Acoustique de



Marseille.

- Un pavillon inox lourd : Le pavillon possède d'excellentes propriétés acoustiques. Il possède également une bague anti-froid pour plus de confort.
- Une écoute multi-fréquence : Pression légère pour l'écoute des bruits vasculaires et cardiaques, pression ferme pour les fréquences pulmonaires.
- Parfait pour les brassards : Son pavillon avec ses bords fins se glisse parfaitement sous les brassards lors de la prise de tension.
- Un point rouge astucieux : Il permet de voir en une seconde quel est le côté actif du pavillon.
- Fabricant français depuis 1907 : Spengler est l'inventeur du tensiomètre et du diagnostic médical moderne.

Un pavillon en inox lourd

L'acier inoxydable a été choisi pour la conception des pavillons de Magister II, car il permet l'excellence acoustique. Une bague anti-froid vient sublimer le pavillon pour apporter plus de confort.

Une écoute multi-fréquence

Deux niveaux d'écoute grâce à la membrane flottante :

- pression légère pour une écoute des basses fréquences (vasculaires et cardiaques)
- pression ferme pour une écoute des hautes fréquences (pulmonaires).

Un point rouge astucieux:

Un point rouge astucieux a été intégré pour indiquer de façon immédiate et très lisible le côté actif du pavillon, adulte ou pédiatrique.

Une ergonomie adaptée aux brassards :

Plus d'aisance au quotidien grâce à la conception du pavillon de Magister II. Il se faufile parfaitement sous le brassard lors de la prise de tension.

Également disponible en version stéthoscope simple pavillon

Spécifications techniques du stéthoscope Spengler Magister II double pavillon :

Magister double pavillon: 34,38 mm

Membrane flottante Matière Fibre de verre

Diamètre grand pavillon

Magister 2 simple pavillon: 47,3 mm Magister 2 double pavillon: 47,3 mm



Diamètre petit pavillon

Magister 2 double pavillon: 37,5 mm

Bague anti-froid Matière TPR

Diamètre grand pavillon

Magister 2 simple pavillon: 47,3 mm Magister 2 double pavillon: 47,3 mm

Diamètre petit pavillon

Magister 2 double pavillon: 37,5 mm

Tubulure et lyre Longueur 60 cm

Lyre

matière : Aluminium

Ressort de lyre

matière : Acier inoxydable

Tubulure

matière: PVC


Embouts auriculaires matière : Silicone

Accessoires

Livré avec 2 paires d'embouts auriculaires

Garantie Spengler 5 ans (hors tubulure et embouts auriculaires). CE.



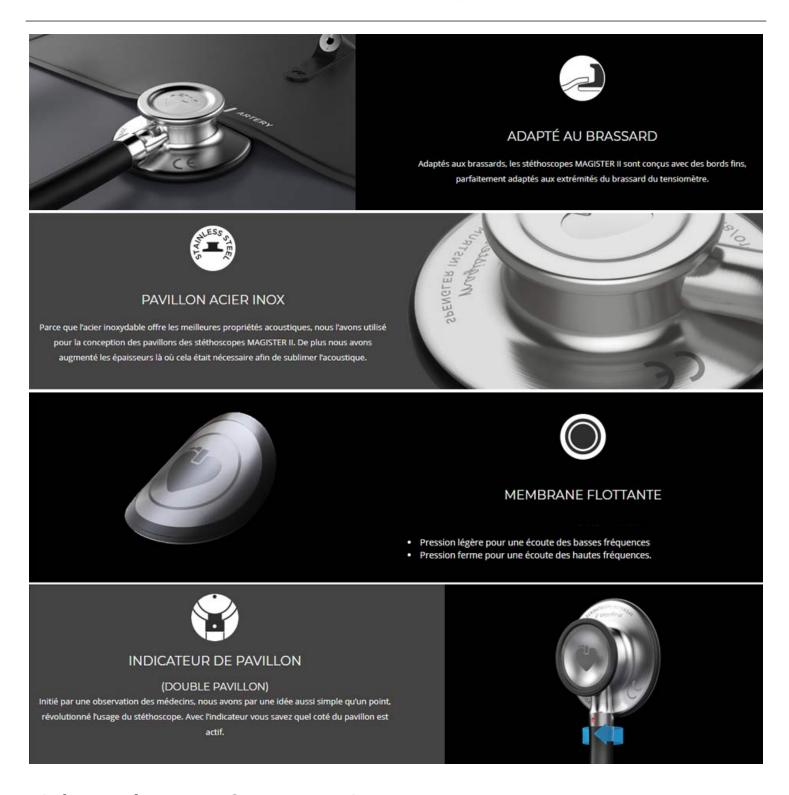

Vidéo du stéthoscope Spengler Magister II

ATTENTION ! La garantie fonctionne sur un article gravé mais celui-ci ne pourra être ni repris ni échangé !

Lien vidéos SPENGLER:



https://www.youtube.com/watch?v=m4XUAXmv2Fc

https://www.youtube.com/watch?v=0NGiBNH5X-E

https://youtu.be/0NGiBNH5X-E

Accessoires et kits de nettoyage pour stéthoscopes

Kit de nettoyage pour stéthoscope