

ECG Cardiomate 3 pistes SPENGLER

Référence 06087



Prix du produit :

989,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les ECG Cardiomate 3,6 ou 12 de Spengler se distinguent par leur performance exceptionnelle. Que vous soyez en cabinet médical ou en déplacement, ces électrocardiographes Cardiomate proposent des fonctionnalités idéales pour l'ensemble des professionnels de santé.

<u>Téléchargez la notice d'utilisation de l'ECG</u> CARDIOMATE 3

Description du produit:



Electrocardiographe Cardiomate 3 pistes SPENGLER

Les <u>électrocardiographes</u> Cardiomate 3, 6 et 12 de Spengler sont des dispositifs médicaux aux performances exceptionnelles. Conçus pour les professionnels de la santé qui recherchent l'excellence, ils délivrent une vitesse d'échantillonnage de 32 000 Hz, leur permettant de réaliser



des diagnostics sans égal. Leur polyvalence et leur connectivité font des Cardiomate 3, 6 et 12 pistes des ECG idéal en cabinet ou en déplacement.

- Une vitesse d'échantillonnage de 32000 hertz pour une précision diagnostique inégalée
- Une onde PQRS parfaitement visible grâce à leur grand écran couleur et inclinable
- Impression facilitée : transformez vos données en documents sur l'imprimante intégrée ou avec une simple imprimante de bureau
- Une poignée ergonomique pour un transport simplifié
- Plus d'un siècle d'excellence médicale signée Spengler : une marque de confiance
- Equipé de « l'interprétation automatique » et du « calcul des intervalles », pour une précision optimale

Cet E.C.G. est équipé d'un écran LCD couleur, inclinable de 7 pouces qui permet une analyse visuelle en couleurs, garantissant une visibilité optimale. Il est également possible de transférer les électrocardiogrammes vers un ordinateur via un câble USB fourni, facilitant ainsi l'analyse des résultats et leur envoi par e-mail.

Réalisez une impression directe en 3 pistes pour Cardiomate 3, en 6 pistes pour Cardiomate 6 ou en 12 pistes pour Cardiomate 12 en seulement 10 secondes et obtenez rapidement vos résultats papier via l'impression thermique sur l'appareil ou en connectant l'ECG à un ordinateur via USB pour une impression sur une imprimante de bureau. Il est possible de visualiser l'électrocardiogramme en 12 pistes sur les 3 appareils et d'imprimer en 12 pistes sur une imprimante de bureau.

Les électrocardiographes Cardiomate de Spengler sont pensés pour une portabilité aisée grâce à leur poignée de transport intégrée. Avec leur puissante batterie de 5200 mAh, il est possible de réaliser plus de 1000 ECG avec une seule charge (autonomie de batterie : 5 heures en mode normal et 3 heures avec impression en continu). Plus d'un siècle d'excellence médicale signée Spengler : une marque de confiance

L'héritage d'Emile Spengler, en collaboration avec les cardiologues Henri Vaquez et Charles Laubry : une référence en diagnostic cardiologique depuis plus de 115 ans .

Caractéristiques techniques de l'ECG Cardiomate 3 :


- Dérivations :12 dérivations standards
- Circuit d'entrée : Protection integrée contre les défibrillateurs
- Vitesse d'échantillonnage : 32000Hz
- Fréquence de réponse : 0.01 Hz~350 Hz
- Taux de rejet du mode commun (CMRR): ?110dB (AC filter off), ?120dB(AC filter on)
- Voltage de polarisation : >±950 mV
- Sensibilité: 1.25 mm/mV, 2.5 mm/mV, 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV, 40 mm/mV,



10/5 mm/mV, 20/10 mm/mV AGC

- Convertisseur A/N 24bit
- Vitesse d'enregistrement : 5 mm/s, 6.25mm/s, 10 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50mm/s
- Impédance entrée : ?100M?
- Constante de temps : ?5s
- Niveau de bruit ?10uV
- Logiciel PC Compatible Windows
- **Application** Android disponible pour tablette et smartphone (uniquement pour laversion bluetooth)
- **Fonctions**: Visualisation temps réel 12 dérivations ; Enregistrement 10s, 60s ou continue ; Zoom, règle et comparaison d'étude
- Base de données : Gestion de la base de données patient sur le PC ou smartphone et tablette pour la version bluetooth
- Format des rapports : PDF, JPEG, XML, FDA-XML, SCP, DICOM
- Alimentation Auto alimenté par USB pour la version USB et 2 piles AAA pour la version bluetooth.
- Filtres: Filtre EMG: 25 Hz / 30 Hz / 40Hz Filtre DFT: 0.05 Hz / 0.15 Hz / 0.25 Hz / 0.32 Hz / 0.5 Hz / 0.67Hz/
- Filtre: AC 50 / 60Hz Filtre passe-bas: 75 Hz / 100 Hz / 150Hz
- **Dimensions**: 68 x 126 x 24 mm (L x I x h)
- Poids: 104 gr (version USB) 132g (version Bluetooth)
- Inclus: 1 câble patient, 4 électrodes d'extrémités (pinces), 6 électrodes thoraciques (ventouse), 1 câble USB, logiciel PC ECG+dongle USB, et 1 manuel d'utilisation.

Garantie Spengler: 2 ans. CE.

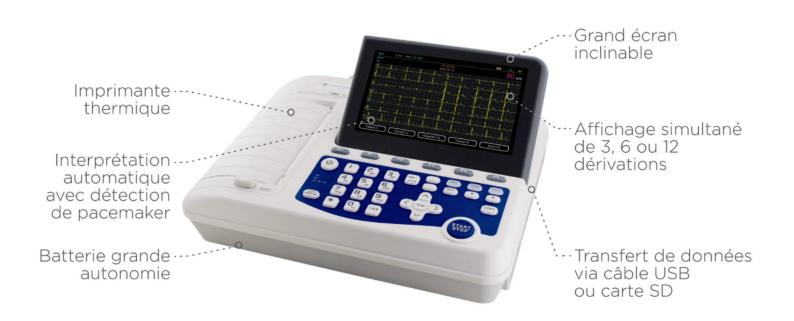



Vidéo de présentation de la	gamme E0	CG	Cardioma	te SPENG	ELEF	₹:			
Comment connecter son EC	G SPENG	LE	R CARDIO	MATE à s	on l	PC ?			
L'appareil ECG Cardiomate de versions :	Spengler 6	est	également	disponible	sur	notre	site	dans	ces
Ref: 06088 : ECG Cardiomate 6	<u>pistes</u>								
Ref. 06089 : ECG Cardiomate 12	<u>pistes</u>								
Liens utiles :									
Accessoires pour ECG									

Accessoires pour ECG

Voir la gamme complète des ECG SPENGLER

Guide d'achat SPENGLER : quel ECG choisir en fonction de sa spécialité médiale ?



	Cardiomate 3	Cardiomate 6	Cardiomate 12	Cardiomate PC USB	Cardiomate PC BLUETOOTH	Cardiomate EVI 7	Cardiomate EVI 10	Cardiomate EVI 10 18 dérivations
Cardiologues en cabinet			++	+	+	++	++	++
Médecin généraliste en cabinet	+	++	+	+	+	++	+	
Médecin généraliste en cabinet et hors cabinet	+	•		++	++	++	+	
IPA	+	+		++	++	+		
Maison de santé pluridisciplinaires	+	++		٠	•	++	++	
EPHAD	+	++				+	+	
Etablissements hospitaliers (cliniques, hôptitaux)		++	+			+	++	++