


ECG Edan SE-301 tactile 3 pistes

Référence 05967

Prix du produit :

1 623,99 € taxe inclu

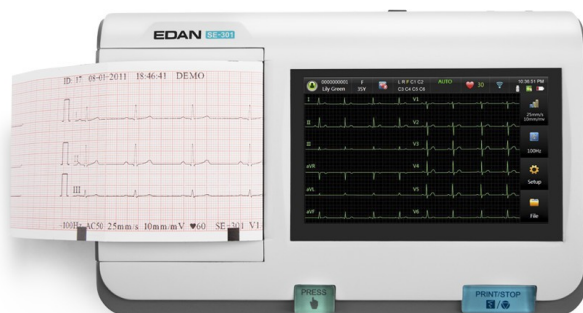

Description brève du produit :

Avec son écran tactile couleur de 5 pouces, L'ECG dernière génération est pratique et très compact ! Grâce à son mode d'enregistrement automatique ou manuel, il offre un diagnostic précis.

Description du produit :

Équipé de la dernière technologie d'écran tactile couleur, l'ECG Edan SE-301 est à la fois très compact (seulement 1 kg) et performant (3 pistes et 12 dérivations).

Le nouvel ECG Edan SE-301 est un [électrocardiographe](#) 3 pistes avec **écran tactile couleur**. Son écran 5 pouces (800 x 600 mm) est lisible et pratique.

Mais cet ECG est aussi **compact et léger** : 1 kg pour 22 x 14 x 5,5 cm. Avec son autonomie de 3 heures et sa petite taille il peut être transporté facilement.

Le mode d'enregistrement de l'ECG est **manuel ou automatique avec interprétation** testée CSE/AHA/MIT.

Possibilité de transférer directement le rapport en PDF / XML / SCP / DICOM vers une clé USB, carte SD ou avec le logiciel en option. Connexions : Ethernet / RS232 / USB / Wifi et Micro SD.

Caractéristiques techniques de l'**ECG Edan SE-301** :

- Écran couleur tactile 5 pouces – 800 x 600
- Poids : 1 kg
- Dimensions : 22 x 14 x 5,5 cm
- Autonomie : 3 heures
- Mémoire 500 ECG.
- Enregistrement des 12 dérivations simultanément avec convertisseur 24 bits

- Bande passante permettant les analyses pédiatriques précises : 0.01 à 300 Hz
- Taux d'échantillonnage 16.000 Hz
- CMRR de 140dB
- Filtration digitale :

Bande passante 0,05/0,15/0,25/0,32/0,5/0,67 Hz.

Bande étroite : 25/35/45 Hz/ OFF

Principal d'alimentation : 75 / 100 / 150 Hz

- Sensibilité / amplitude : 2,5/5/10/20,10/5, AGC (mm/mV)
- Détection automatique de la qualité du signal avec code couleur pour chaque électrode
- Alimentation : Secteur (220V / 110V - 50/60 Hz) et batterie rechargeable Li-ion – autonomie 3 heures environ
- L'imprimante thermique haute résolution est intégrée mais il y a aussi la possibilité de brancher une imprimante externe pour imprimer les 12 dérivations sur papier A4.
- Vitesse de déroulement du papier : 5 ; 6.25 ; 10 ; 12,5 ; 25 ; 50 mm/s.

L'**ECG Edan SE-301** est livré avec :

- 1 câble patient 10 fils à fiche banane
- 6 électrodes précordiales
- 4 sangles avec électrodes intégrées
- 1 liasse de papier 80 mm x 20 m (voir notre [papier de rechange pour ECG Edan](#))
- 1 manuel d'utilisation
- 1 fusible de rechange

Garantie 2 ans. CE.