


ELECTROSTIMULATEUR ELITE 150 4 CANAUX 150 PROGRAMMES GLOBUS - appareil seul

Référence 09294

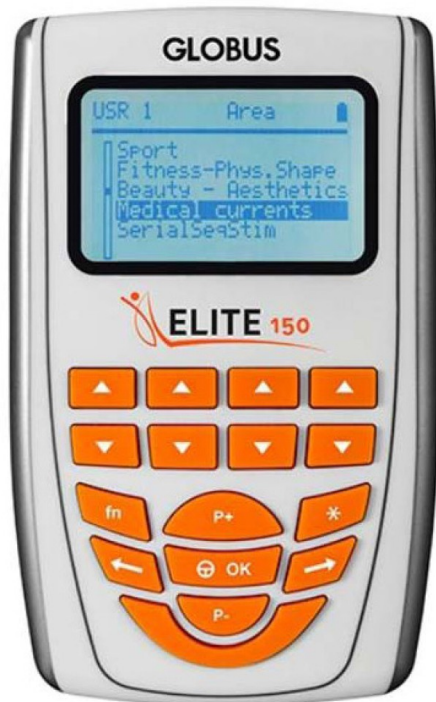

Prix du produit :

325,38 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'électrostimulateur **Elite 150 GLOBUS** associe **4 canaux indépendants**, **150 programmes** et une puissance jusqu'à **120 mA par canal** pour les usages en EMS et TENS. Compact, rechargeable et doté d'un écran rétroéclairé, il s'intègre facilement en cabinet comme en utilisation à domicile.

DM IIa • CE • 4 Canaux indépendants • 150 Programmes

Description du produit :

Elite 150, 4 canaux pour des protocoles variés

Ce électrostimulateur 4 voies a été conçu pour réunir diversité de programmes, réglages détaillés et utilisation fluide au quotidien. Le **Globus Elite 150** met à disposition **150 programmes** dédiés au sport, au fitness, à l'esthétique, à la rééducation et au **TENS**. Il est classé **DM IIa**.

Grâce à ses **4 canaux indépendants**, l'appareil peut piloter jusqu'à **8 électrodes** au cours d'une même séance. Cette configuration aide à intervenir sur plusieurs zones musculaires sans multiplier les changements de matériel entre deux étapes de travail.

La stimulation séquentielle 3S convient aux protocoles orientés drainage musculaire. Idéal pour les kinésithérapeutes, centres de rééducation, cabinets de médecine du sport, préparateurs physiques et professionnels de l'esthétique.

Points forts

- **Bibliothèque de 150 programmes** : large choix de séances pour couvrir les besoins en sport, fitness, esthétique, réhabilitation et TENS selon l'objectif recherché.
- **4 sorties réglables séparément** : chaque canal peut être ajusté individuellement, ce qui facilite le travail sur différents groupes musculaires avec davantage de maîtrise.
- **Fonction 3S** : la stimulation séquentielle accompagne les protocoles ciblant le drainage musculaire et les phases de récupération.
- **Réglages étendus** : fréquence de **0,3 à 150 Hz** et largeur d'impulsion de **40 à 450 µs** pour adapter les paramètres au type de courant utilisé.
- **Alimentation rechargeable** : format pratique pour les séances en cabinet, en structure sportive ou dans le cadre d'un accompagnement à domicile.
- **Affichage rétroéclairé** : consultation plus simple des informations et des paramètres, y compris lorsque la luminosité ambiante est réduite.

Caractéristiques techniques

Garantie : 2 ans sauf câbles et batteries

Marque : GLOBUS

Fabricant : DOMINO s.r.l.

Type de produit : Électrostimulateur 4 canaux

Programmes : 150 programmes

Canaux : 4 indépendants, jusqu'à 8 électrodes

Fréquence : 0,3 à 150 Hz

Largeur d'impulsion : 40 à 450 µs

Intensité : 0 à 120 mA par canal

Forme d'onde : carrée, biphasique, symétrique, compensée

Écran : rétroéclairé, zone visible 2,6"

Alimentation : batteries rechargeables

Dimensions : 100 x 160 x 35 mm

Poids Net : 450 g

Matériau : ABS alimentaire

Indice de protection : IP22

Utilisation : réutilisable

Type de courant : EMS et TENS

Conditionnement : appareil livré avec accessoires

Normes & sécurité

Classe : DM IIa

Marquage : CE

Norme : directive 93/42/CEE-2007/47/CEE

Organisme notifié : Kiwa Cermet Italia s.p.a. N° 0476

Fabricant : DOMINO s.r.l.

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le coffret contient 1 stimulateur Elite 150, 1 sacoche de transport, 4 câbles de raccordement, 4 électrodes autocollantes carrées, 4 électrodes autocollantes rectangulaires, 1 chargeur de batteries et 1 manuel d'utilisation.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour maintenir votre équipement opérationnel, les électrode neurostimulation - accessoires thérapeutiques aident à renouveler les consommables de contact. Les câbles pour électrostimulateurs et une batterie pour électrostimulateur complètent utilement le matériel soumis aux usages répétés.

JJ/26