


ECG portable 12 dérivations Biocare iE 10 avec interprétation - écran 7", Wi-Fi, 4 h

Référence 09948

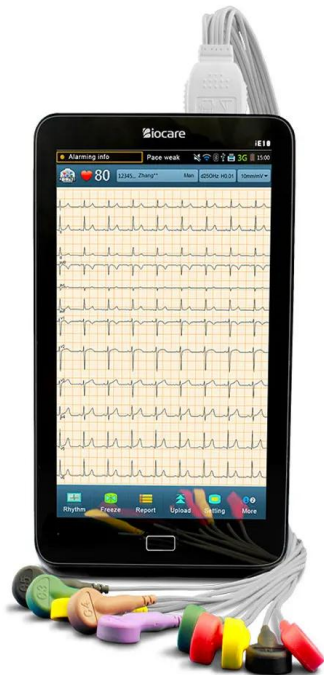

Prix du produit :

1 090,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'iE 10 associe un **écran tactile 7"** (1280x800) en format tablette avec une **orientation automatique** (portrait/paysage, capteur de gravité), une **acquisition 12 dérivations simultanées** et des filtres complets (dont auto-adaptatifs) pour des tracés fiables. Le **programme d'analyse CardioPro** (base CSE) fournit des mesures et conclusions standardisées, le **tampon 300 s** permet de figer/relire le tracé. Des rappels à l'écran et des **alarmes visuelles/vocales multilingues** assistent l'opérateur.

Une plateforme portable pour examens au cabinet, au service et en visite.

Utilisation : **adultes, enfants et nourrissons.**

Description du produit :

Points clés de l'ECG portable 12 dérivations Biocare iE 10 avec interprétation

- **12 dérivations** avec interprétation CardioPro (CSE) et **analyse du rythme jusqu'à 300 s.**
- **Écran 7"** (1280x800), orientation auto, **guidage à l'écran** et alarmes claires.
- **Wi-Fi** vers [logiciel ECG](#); imprimante laser externe; **mémoire interne jusqu'à 1500 cas.**
- **0.5 kg, 19.4 x 11.7 x 2.5 cm, batterie 4 h**; sac de transport et housse silicone inclus.

Spécifications essentielles de l'ECG portable 12 dérivations Biocare iE 10 avec interprétation

Catégorie	Détails
Usages	Hôpital, clinique, cabinet; visites à domicile; adultes/enfants/nourrissons
Modes & affichage	Auto, standard (12 dérivations), rythme ; tampon 300 s (gel du tracé); zoom/pinch selon version; orientation auto
Paramètres mesurés	FC, PR, QRS, QT/QTc, axes P/QRS/T, RV5, SV1, RV5+SV1
Chaîne de signal	Taux d'échantillonnage ~8000 Hz ; A/N 24 bits ; impédance d'entrée ≥2.5 MΩ ; CMRR >110 dB ; bruit ≤15 µVp-p ; bande passante 0.01–250 Hz ; sensibilités (mm/mV): 1.25, 2.5, 5, 10/5, 10, 20/10, 20
Filtres	AC (50/60 Hz/off), DFT (0.01/0.02/0.05/0.35/0.5/0.8 Hz), EMG , passerbas 25/35/75/100/150/250 Hz
Export & connectivité	PDF en base; ECG/XML/JPEG/DICOM (selon configuration/logiciels); Wi-Fi/USB/MicroSD (selon configuration); compatibilités HL7 (selon logiciels)
Stockage	Jusqu'à 1500 cas en mémoire interne; extensions via MicroSD/USB ; selon configuration, certains kits proposent jusqu'à ~3000 cas; base interne typique: 2 Go selon kit
Impression	Compatible imprimante laser externe (modèles selon compatibilité fabricant)
Énergie & autonomie	Batterie Li-ion ~4 h d'utilisation continue; adaptateur secteur inclus
Dimensions & poids	19.4 × 11.7 × 2.5 cm; 0.5 kg
Sécurité	Détection de stimulateur cardiaque et protection contre la défibrillation

Remarque: certaines fonctions/formats nécessitent des options logicielles ou des configurations spécifiques. Vérifier la compatibilité avant intégration.

Inclus dans la boîte

- Appareil ECG portable **Biocare iE 10**
- **Câble patient**(longueur: préciser si disponible)
- **4** pinces membres, **6** poires précordiales
- **10** électrodes à usage unique
- Adaptateur secteur, **sac de transport**, **housse silicone**, manuel d'utilisation

Garantie & services

Garantie 2 ans (hors câbles, accumulateurs et accessoires).

Livraison rapide – SAV de proximité – Assistance à l'intégration (DME/PACS, HL7) *selon configuration.*

Mentions

Dispositif médical portant le marquage **CE**.

L'**interprétation automatique** est une *aide* au diagnostic et ne remplace pas le jugement d'un **professionnel de santé**.

Lire attentivement la notice avant utilisation.

Classe/normes (MDR/EN/IEC) selon documentation fabricant.

Complétez votre panier afin de bénéficier de la livraison gratuite en ajoutant des :

- [Electrocardiographes de repos](#)
- [Electrocardiographes portable](#)
- [Electrocardiographes avec interprétations](#)
- [Electrocardiographes 12 pistes](#)