


ECG PORTABLE 12 DÉRIVATIONS iE 10 AVEC INTERPRÉTATION BIOCARE - écran 7 pouces

Référence 09948

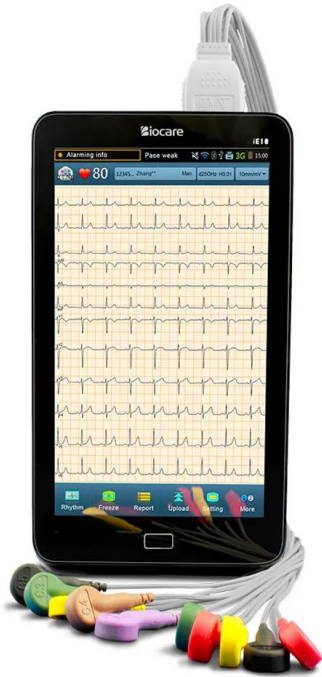

Prix du produit :

1 111,80 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'ECG portable 12 dérivations iE 10 BIOCARE réunit interprétation intégrée, affichage tactile 7 pouces et acquisition simultanée pour les enregistrements en mobilité. Mémoire jusqu'à 1500 cas, connexion Wi Fi, autonomie 4 h et analyse du rythme jusqu'à 300 s.

CE • Écran tactile 7 pouces • Wi Fi • Autonomie 4 h

Description du produit :

ECG portable iE 10, lecture 12 dérivations en mobilité

Ce ECG portable permet de réaliser des enregistrements 12 dérivations aussi bien au cabinet qu'au chevet du patient. L'ECG portable 12 dérivations iE 10 BIOCARE intègre une aide à l'interprétation, un écran tactile 7 pouces et une connexion Wi Fi pour une utilisation souple au quotidien.

La capture simultanée des 12 dérivations, les filtres numériques et l'analyse du rythme jusqu'à 300 s facilitent l'obtention d'un tracé lisible. L'affichage s'adapte en mode portrait ou paysage selon l'environnement de travail.

Compact avec environ 0,5 kg et une autonomie de 4 h, il accompagne facilement les examens en déplacement. Idéal pour les cabinets médicaux, services hospitaliers, cliniques, cardiologues, urgentistes et infirmiers intervenant en mobilité.

Points forts

- **Acquisition 12 dérivations simultanées** : enregistrement complet du tracé cardiaque sans succession de prises, pour gagner en fluidité pendant l'examen.
- **Interprétation CardioPro** : programme d'analyse basé sur la base CSE avec mesures standardisées, utile pour organiser une première lecture.
- **Format compact** : environ 0,5 kg et dimensions réduites, pour passer aisément d'une salle de consultation à une visite externe.
- **Écran tactile 7 pouces** : résolution 1280 x 800 et orientation automatique pour une lecture confortable sur bureau, chariot ou au lit du patient.
- **Analyse du rythme jusqu'à 300 s** : permet de revoir une séquence enregistrée et de figer le tracé lorsque nécessaire.
- **Mémoire et connectivité** : stockage interne jusqu'à 1500 cas et transfert Wi Fi vers un logiciel ECG pour simplifier l'archivage.

Caractéristiques techniques

Garantie : 2 ans (hors câbles, accumulateurs et accessoires)

Marque : BIOCARE

Type de produit : ECG portable 12 dérivations avec interprétation

Écran : écran tactile capacitif 7 pouces, résolution 1280 x 800

Dimensions : 19,4 x 11,7 x 2,5 cm

Poids Net : environ 0,5 kg

Autonomie : jusqu'à 4 h en utilisation continue

Alimentation : batterie Li ion rechargeable, adaptateur secteur inclus

Acquisition : 12 dérivations simultanées

Analyse du rythme : jusqu'à 300 s

Stockage : mémoire interne jusqu'à 1500 cas

Connectivité : Wi Fi

Impression : compatible avec imprimante laser externe

Utilisation : adultes, enfants et nourrissons

Fonctions de sécurité : détection de stimulateur cardiaque et protection contre la défibrillation

Conditionnement/emballage : appareil avec accessoires de base et sac de transport

Normes & sécurité

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

L'emballage contient l'appareil ECG portable Biocare iE 10, un câble patient, 4 pinces membres, 6 poires précordiales, 10 électrodes à usage unique, un adaptateur secteur, un sac de transport, une housse silicone et le manuel d'utilisation.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'équipement, les électrodes ECG contribuent à un contact adapté lors des enregistrements répétés. Les câbles & accessoires pour ECG sont utiles pour le renouvellement du matériel, tandis que le gel échographique accompagne d'autres examens réalisés au poste de diagnostic.