


SET DE POSE DE STÉRILET CISEAUX COUPE FILS DISTALE 4 PIÈCES

Référence 09876

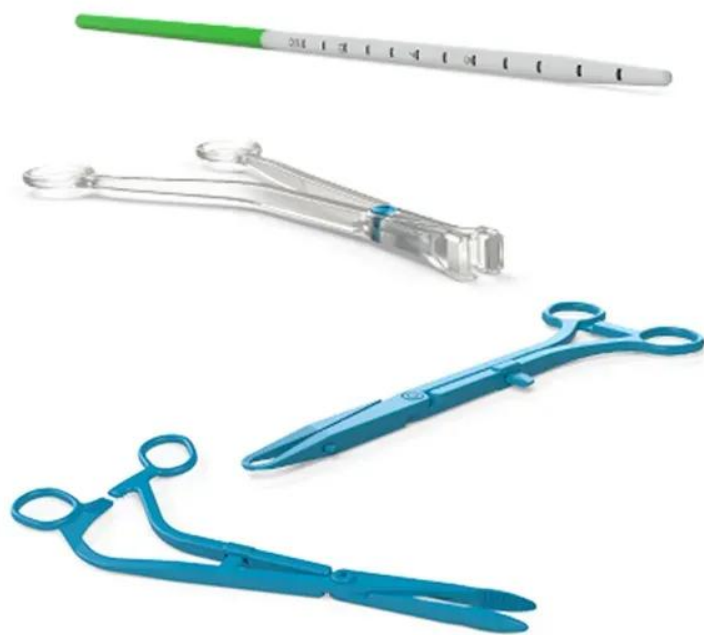

Prix du produit :

0,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **set de pose de stérilet 4 pièces** est conçu pour permettre la pose sécurisée d'un dispositif intra-utérin dans la cavité utérine. Il offre aux professionnels de santé un outil pratique et stérile pour réaliser la procédure en toute sécurité.

Description du produit :

Set de pose de stérilet 4 pièces – stérile, usage unique

Le **set de pose de stérilet 4 pièces** permet la pose sécurisée d'un dispositif intra-utérin dans la cavité utérine. Conçu pour un usage pratique et hygiénique, il offre aux professionnels de santé un outil complet pour réaliser la procédure en toute sécurité.

Composition du set

- **Pince de Pozzi droite** : préhension du col utérin et traction-fixation pour ajuster l'angle de flexion de l'utérus à 180°, facilitant l'introduction des instruments et la pose du DIU sans risque de perforation.
- **Pince de Chéron coudée** : nettoyage de l'utérus et de la zone de travail.
- **Ciseaux coupe-fil** : latéral ou distal selon la préférence du praticien pour couper les fils du DIU.
- **Hystéromètre** : mesure de la profondeur de la cavité utérine pour un positionnement précis

du stérilet.

Caractéristiques techniques

- **Usage unique** : Oui
- **Classe** : I
- **Stérile** : Oui
- **Mode de stérilisation** : Oxyde d'éthylène
- **Présence de latex** : Non
- **Durée de vie** : 5 ans
- **Emballage** : Individuel stérile
- **Conditionnement** : Boîte de 10 sets
- **Marquage CE**