


BABY DALTON TEST DEPISTAGE COULEURS ENFANT MC2 - livret 4 pages

Référence 00461

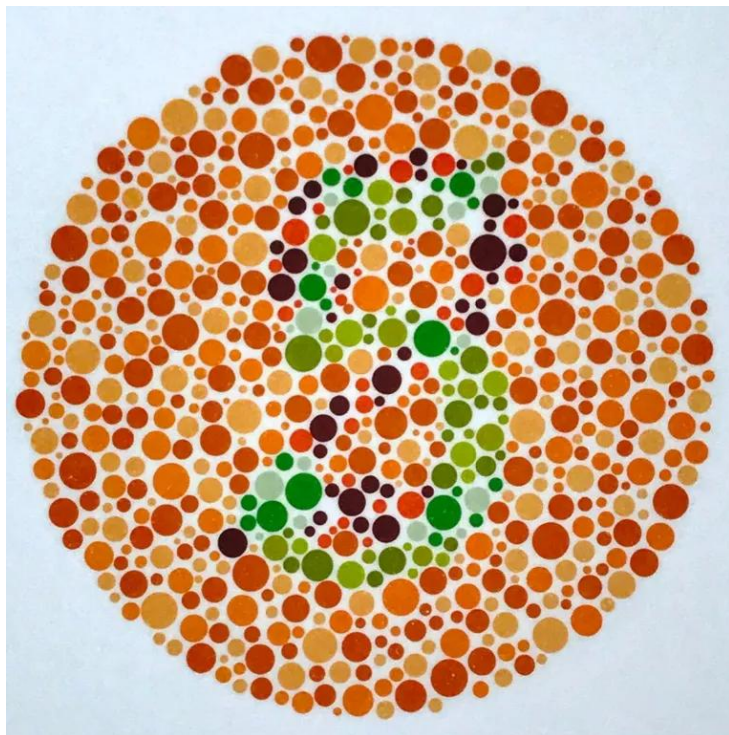

Prix du produit :

49,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **Baby Dalton test de dépistage couleurs MC2** permet d'explorer la perception colorée chez l'enfant avec un **livret 4 pages**, à une distance d'environ **60 cm**. Un support pratique pour un repérage visuel rapide en contexte pédiatrique.

4 Pages • Utilisation à 60 cm • Dépistage vision des couleurs • Usage pédiatrique

Description du produit :

Baby Dalton, livret couleurs pensé pour l'enfant

Ce test sensoriel est conçu pour le repérage des troubles de la vision des couleurs chez l'enfant. Le **Baby Dalton test de dépistage couleurs MC2** se présente sous forme de **livret 4 pages** et s'utilise à **60 cm environ**, perpendiculairement aux axes visuels, dans de bonnes conditions d'éclairage.

Les planches font appel à des repères visuels simples, avec un chiffre ou des figures facilement identifiables par le jeune patient. Cette approche rend le dépistage initial plus accessible lors d'un examen visuel courant.

Idéal pour les cabinets d'ophtalmologie, cabinets médicaux, pédiatres, orthoptistes, services de santé scolaire et centres de dépistage.

Points forts

- **Livret 4 pages** : plusieurs planches successives pour diversifier les observations et accompagner l'analyse du professionnel.
- **Distance d'utilisation définie** : emploi à **60 cm environ** pour conserver des conditions de test homogènes.
- **Visuels adaptés à l'enfant** : présence d'un chiffre et de dessins simples comme le canard, le lapin ou le papillon.
- **Usage en dépistage pédiatrique** : support destiné au repérage des difficultés de vision des couleurs chez les jeunes patients.
- **Mise en place souple** : utilisation recommandée en lumière naturelle, avec possibilité d'une source artificielle à distance si nécessaire.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Test de dépistage de la vision des couleurs

Nom du produit : Baby Dalton Test Dépistage Couleurs

Marque : MC2

Public : Enfant

Format : Livret 4 pages

Utilisation : Dépistage visuel des couleurs

Distance d'utilisation : 60 cm environ

Positionnement : Perpendiculairement aux axes visuels

Conditions d'éclairage : Lumière naturelle recommandée, source artificielle à distance si utilisée

Lecture planche 1 : Sujet normal voit le chiffre 5

Lecture planche 2 : Sujet normal voit un canard

Lecture planche 3 : Sujet normal et DEUTAN voient un lapin

Lecture planche 4 : Sujet normal et PROTAN voient un papillon

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour organiser l'examen dans de bonnes conditions, les divans pédiatriques favorisent une installation adaptée de l'enfant. Les lampes d'examen aident à maîtriser l'éclairage, tandis que les supports pédagogiques enrichissent l'accompagnement en consultation ou en milieu scolaire.